



Líneas de productos

Refrigerador de farmacia:

MC-5L42(220V/50Hz, 110V/60Hz)

MC-5L126

MC- 5L316B(220V/50Hz)

MC-5L316

MC-5L416

MC-5L416C

MC-5L606

MC-5L756

MC-5L1006

MC-5L1006C

Combinado frigorífico-congelador

MCD-25L350

MCD-40L350

MCD-25L506

MCD-40L506

Congelador de temperatura ultra baja:

MD-86L108

MD-86L358

MD-86L458

MD-86L458S

MD-86L568

MD-86L568BS

MD-86L718

MD-86L708BS

MD-86L838

MD-86L818BS

Congelador de baja temperatura:

MD-40L106

MD-40L308

MD-40L518

MD-25W368

MD-40W368

MD-25L106

MD-25L308

MD-25L518

Refrigerador de bancos de sangre:

MXY-558(220V/50Hz/60Hz)

Regla de denominación de los productos Midea



MD – 86 L 838

Capacidad neta (litros)

Tipo: L=Vertical W=Horizontal

Rango de temperatura de funcionamiento: -86°C

Códigos de fábrica

MD: Congelador Midea

MC: Refrigerador Midea

MCD: Combinación de congelador y
frigorífico Midea

Refrigerador de sobremesa para farmacia MC-5L42

Capacidad neta: 42 L



Modelo: MC-5L42

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz
 - Clase climática: N
 - Rango de Temperatura: 2~8 °C
 - Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
 - Tamaño exterior: 480*450*550 mm
 - Tamaño interior: 400*345*380 mm
 - Peso Neto/Bruto: 23.5 kg /26kg
 - Bandejas incluidas: 3
-
- Controlado por microprocesador
 - Enfriamiento por aire forzado
 - Descongelamiento automático
 - Pantalla LED
 - Batería de Backup
 - Puerto USB
 - Cierre de seguridad con llave
 - Puerta en vidrio de baja emisión Low-E
 - Alarmas por fallas de funcionamiento
 - Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Control por
Microprocesador

Puerto USB

Luz LED

Ventilador
DC Turbo

Bandejas
Ajustables

Puerta en
Vidrio
Low-E

Pies



MC-5L42

Uniformidad de temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
Certificados: CE,UL

Refrigerador bajo mostrador para farmacia MC-5L126

Capacidad neta: 126 L



Modelo: MC-5L126

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: 2~8 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 595*615*810mm
- Tamaño interior: 505*467*620mm
- Peso Neto/Bruto: 43kg/48kg

- Controlado por microprocesador
- Enfriamiento por aire forzado
- Descongelamiento automático
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Cierre de seguridad con llave
- Puertas con cierre automático
- Puerta en vidrio de baja emisión Low-E
- Alarmas por fallas de funcionamiento
- Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Control por
Microprocesador

Luz LED

Ventilador
DC Turbo

Bandejas Ajustables

Puerta en
Vidrio
Low-E

Pies fijos



MC-5L126

Uniformidad de temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE,UL

Refrigerador farmacéutico MC-5L316 Capacidad neta: 316 L

Modelo: MC-5L316



Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
 - Clase climática: N
 - Rango de Temperatura: 2~8 °C
 - Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
 - Tamaño exterior: 595*603*1920mm
 - Tamaño interior: 500*464*1343mm
 - Peso Neto/Bruto: 72kg /81 kg
 - Bandejas incluidas: 5
-
- Controlado por microprocesador
 - Enfriamiento por aire forzado
 - Pantalla LED–Temperatura y Humedad
 - **Tecnología de enfriamiento superior(Top Cooling)**
 - Descongelamiento automático
 - Batería de Backup
 - Puerto USB
 - Cierre de seguridad con llave
 - Puertas con cierre automático
 - Puerta con calentamiento eléctrico
 - Alarmas por fallas de funcionamiento
 - Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)



Refrigerador farmacéutico MC-5L416 Capacidad neta: 416 L



Control por
Microprocesador

Luz LED

Ventilador
DC Turbo

Enfriamiento
superior tipo
cortina de aire

Bandejas
Ajustables con
portaetiquetas

Puerta con calentamiento
eléctrico

Compresor Inverter

Ruedas
de con
frenos



Pantalla LED
Temp +Humedad
con puerto USB

Ducto de aire
incorporado

Agujero de
prueba

MC-5L416

Uniformidad de temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE,UL

Modelo: MC-5L416

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50/60Hz、115V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: $2\sim 8^{\circ}\text{C}$
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 690*653*1920mm
- Tamaño interior: 595*514*1343mm
- Peso Neto/Bruto: 88 kg /97 kg
- Bandejas incluidas: 5
- Controlado por microprocesador
- Enfriamiento por aire forzado
- Pantalla LED-Temperatura y Humedad
- Tecnología de enfriamiento superior(Top Cooling)
- Descongelamiento automático
- Compresor Inverter
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Cierre de seguridad con llave
- Puertas con cierre automático
- Puerta con calentamiento eléctrico(Puerta maciza opcional)
- Alarmas por fallas de funcionamiento Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Refrigerador farmacéutico MC-5L606 Capacidad neta: 606 L



Control por
Microprocesador

Luz LED

Ventilador
DC Turbo

Enfriamiento
superior tipo
cortina de aire

Bandejas
Ajustables con
portaetiquetas

Puerta con calentamiento
eléctrico

Compresor Inverter

Ruedas
de con
frenos

Pantalla LED
Temp +Humedad
con puerto USB

Ducto de aire
incorporado

Agujero de
prueba



MC-5L606

Uniformidad de temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
Certificados: CE

Modelo: MC-5L606

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: $2\sim 8^{\circ}\text{C}$
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 760*825*1925mm
- Tamaño interior: 660*590*1560mm
- Peso Neto/Bruto: 116 kg /138 kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad (Material interior de acero inoxidable disponible)
- Bandejas incluidas: 6
- Controlado por microprocesador
- Enfriamiento por aire forzado
- Pantalla LED—Temperatura y Humedad
- Tecnología de enfriamiento superior (Top Cooling)
- Descongelamiento automático
- Compresor Inverter
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Cierre de seguridad con llave
- Puertas con cierre automático
- Puerta con calentamiento eléctrico
- Alarmas por fallas de funcionamiento
- Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Refrigerador farmacéutico MC-5L756 Capacidad neta: 756 L



Modelo: MC-5L756

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50/60Hz、115V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: 2~8 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 970*808*1920mm
- Tamaño interior: 880*634*1354mm
- Peso Neto/Bruto: 140 kg /161 kg
- Bandejas incluidas: 10
- Controlado por microprocesador
- Enfriamiento por aire forzado
- Pantalla LED—Temperatura y Humedad
- **Tecnología de enfriamiento superior(Top Cooling)**
- Descongelamiento automático
- **Compresor Inverter**
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Cierre de seguridad con llave
- Puertas con cierre automático
- **Puerta con calentamiento eléctrico**
- Alarmas por fallas de funcionamiento Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)



Refrigerador farmacéutico MC-5L1006 Capacidad neta: 1006 L



Modelo: MC-5L1006

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50/60Hz、115V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: 2~8 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 1220*808*1920mm
- Tamaño interior: 1130*634*1354mm
- Peso Neto/Bruto: 160 kg /184 kg
- Bandejas incluidas: 10
- Controlado por microprocesador
- Enfriamiento por aire forzado
- Pantalla LED–Temperatura y Humedad
- **Tecnología de enfriamiento superior(Top Cooling)**
- Descongelamiento automático
- **Compresor Inverter**
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Cierre de seguridad con llave
- Puertas con cierre automático
- **Puerta con calentamiento eléctrico(Puerta maciza opcional)**
- Alarmas por fallas de funcionamiento Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Control por
Microprocesador

Luz LED

Ventilador
DC Turbo

**Enfriamiento
superior tipo
cortina de aire**

Bandejas
Ajustables con
portaetiquetas

Puerta con
calentamiento
eléctrico

Compresor Inverter

Ruedas
de con
frenos

Pantalla LED
Temp
+Humedad
con puerto
USB

**Ducto de aire
incorporado**

Agujero de
prueba



MC-5L1006

Uniformidad de temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE,UL



MD-25L106
Uniformidad de temperatura: $\leq 2^{\circ}\text{C}$
Certificados: CE

Model: MD-25L106

Especificaciones técnicas:


- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、 115V~/60Hz、 220-240V~/60Hz
 - Clase climática: N
 - Rango de Temperatura: -10°C ~ -25°C
 - Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
 - Tamaño exterior: 600*610*815mm
 - Tamaño interior: 455*460*595mm
 - Peso Neto/Bruto: 39 kg /44 kg
 - Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
 - Bandejas incluidas: 3
-
- Controlado por microprocesador
 - Pantalla LED
 - Batería de Backup
 - Puerto USB
 - Proceso rápido de congelación
 - Cierre de seguridad con llave
 - Alarmas por fallas de funcionamiento
 - Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)



MD-25L308

Uniformidad de temperatura:
 $\leq 3.5^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE, UL

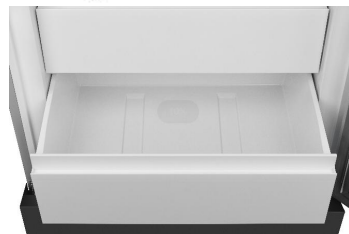

Model: MD-25L308

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、 115V~/60Hz、 220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: -10°C ~ -25°C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 700*690*1920mm
- Tamaño interior: 540*450*1277mm
- Peso Neto/Bruto: 100 kg / 112 kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- **(Material interior de acero inoxidable disponible)**
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Alarmas por fallas de funcionamiento
- Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Congelador Vertical MD-25L518 Capacidad neta: 518 L



MD-25L518

Uniformidad de temperatura: $\leq 3^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE

Model: MD-25L518

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: -10°C ~ -25°C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 866*811*1920mm
- Tamaño interior: 680*620*650mm & 680*620*650mm
- Peso Neto/Bruto: 142 kg / 165 kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- **(Material interior de acero inoxidable disponible)**
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Puertas con cierre automático
- 2 puertas independientes con manija de fácil apertura
- Alarmas por fallas de funcionamiento:
- Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Model: MD-40L106

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、 115V~/60Hz、 220-240V~/60Hz
 - Clase climática: N
 - Rango de Temperatura: -20~-40 °C
 - Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
 - Tamaño exterior: 600*610*815mm
 - Tamaño interior: 455*460*595mm
 - Peso Neto/Bruto: 43 kg /48 kg
 - Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
 - Bandejas incluidas: 3
-
- Controlado por microprocesador
 - Pantalla LED
 - Batería de Backup
 - Puerto USB
 - Proceso rápido de congelación
 - Cierre de seguridad con llave
 - Alarmas por fallas de funcionamiento
 - Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)



MD-40L106

Uniformidad de temperatura: $\leq 3^{\circ}\text{C}$


Certificados: CE



MD-40L308

Uniformidad de temperatura:
 $\leq 3.9^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE

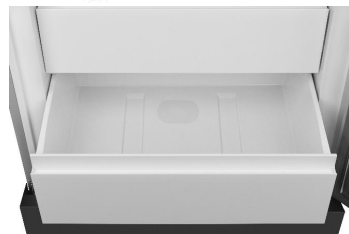

Model: MD-40L308

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、 115V~/60Hz、 220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: -20°C ~ -40°C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 700*690*1920mm
- Tamaño interior: 540*450*1277mm
- Peso Neto/Bruto: 102 kg / 114 kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- (Material interior de acero inoxidable disponible)
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Alarmas por fallas de funcionamiento
- Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Congelador Vertical MD-40L518 Capacidad neta: 518 L



Model: MD-40L518

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: -20~-40 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 866*811*1920mm
- Tamaño interior: 680*620*650mm & 680*620*650mm
- Peso Neto/Bruto: 142 kg / 165 kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- **(Material interior de acero inoxidable disponible)**
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Puertas con cierre automático
- 2 puertas independientes con manija de fácil apertura
- Alarmas por fallas de funcionamiento:
- Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)



MD-40L518

Uniformidad de temperatura: $\leq 3^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE

Congelador Horizontal MD-40W368 Capacidad neta: 368 L



Model: MD-40W368

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、 115V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: -20~-40 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 1255*745*853mm
- Tamaño interior: 870*550*648 & 230*550*428mm
- Peso Neto/Bruto: 60 kg / 67 kg
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- Alarmas por fallas de funcionamiento
- Alarma sonora y auditiva (alta y baja temperatura, error del sensor, alarma por falla eléctrica)

MD-40W368

Uniformidad de temperatura: $\leq 3^{\circ}\text{C}$

Certificados: CE

Refrigerador/Congelador combinado MCD-25L350
Capacidad neta: 350 L(Refrigerador 206L, Congelador 144L)



MCD-25L350

Uniformidad de temperatura: Refrigerador $\pm$ 1.5 °C,
Congelador $\leq$ 3°C
Certificados: CE

Model: MCD-25L350

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: Refrigerador: 2 ~ 8 °C
- Congelador: -10 ~ -25 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm$ 0.1C
- Tamaño exterior: 695*655*1920mm
- Tamaño interior: Refrigerador: 600*505*690mm,
- Congelador: 540*480*560mm
- Peso Neto/Bruto: 106 kg / 118kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- **Dos compresores, dos sistemas de refrigeración independientes**
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Alarmas por fallas de funcionamiento:
- Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Refrigerador/Congelador combinado MCD-25L506
Capacidad neta:506 L(Refrigerador 247L, Congelador 259L)



MCD-25L506

Uniformidad de temperatura: Refrigerador $\pm$ 1.5 °C,
Congelador $\leq$ 3°C
Certificados: CE

Model : MCD-25L506

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: Refrigerador: 2 ~ 8 °C
- Congelador: -10 ~ -25 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm$ 0.1C
- Tamaño exterior: 866*811*1920mm
- Tamaño interior: Refrigerador: 680*596*630mm,
- Congelador: 680*620*650mm
- Peso Neto/Bruto: 141 kg / 163kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- **Dos compresores, dos sistemas de refrigeración independientes**
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Alarmas por fallas de funcionamiento:
- Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Refrigerador/Congelador combinado MCD-40L350
Capacidad neta: 350 L(Refrigerador 206L, Congelador 144L)



MCD-40L350

Uniformidad de temperatura: Refrigerador $\pm$ 1.5 °C,
Congelador $\leq$ 3°C
Certificados: CE



Model: MCD-40L350

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: Refrigerador: 2 ~ 8 °C
- Congelador: -10 ~ -40 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm$ 0.1C
- Tamaño exterior: 695*655*1920mm
- Tamaño interior: Refrigerador: 600*505*690mm,
- Congelador: 540*480*560mm
- Peso Neto/Bruto: 109 kg / 121kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- **Dos compresores, dos sistemas de refrigeración independientes**
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Alarmas por fallas de funcionamiento:
- Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Refrigerador/Congelador combinado MCD-40L506
Capacidad neta:506 L(Refrigerador 247L, Congelador 259L)



MCD-40L506

Uniformidad de temperatura: Refrigerador $\pm$ 1.5 °C,
Congelador $\leq$ 3°C
Certificados: CE

Model : MCD-40L506

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、115V~/60Hz、220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: Refrigerador: 2 ~ 8 °C
- Congelador: -10 ~ -40 °C
- Exactitud de la temperatura: $\pm$ 0.1C
- Tamaño exterior: 866*811*1920mm
- Tamaño interior: Refrigerador: 680*596*630mm,
- Congelador: 680*620*650mm
- Peso Neto/Bruto: 141 kg / 163kg
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- Controlado por microprocesador
- Pantalla LED
- Batería de Backup
- Puerto USB
- **Dos compresores, dos sistemas de refrigeración independientes**
- Proceso rápido de congelación
- Cierre de seguridad con llave
- Alarmas por fallas de funcionamiento:
- Alarma sonora y auditiva(alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica)

Ultracongelador MD-86L108 (Capacidad neta:108 L)



Ultracongelador bajo encimera MD-86L108

Apilable

Certificado: CE, UL

Model : MD-86L108

Especificaciones técnicas:

- Conexión eléctrica: 220-240V~/50Hz、 115V~/60Hz、 220-240V~/60Hz
- Clase climática: N
- Rango de Temperatura: -40°C ~ -86°C
- Exactitud de la temperatura: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Tamaño exterior: 955*675*815mm
- Tamaño interior: 440*435*590mm
- Peso Neto/Bruto: 113 kg / 141 kg
- Cantidad de CryoTubos de 2mL: 9,000
- Cantidad de Freezer Rack: 6 (5*3, 140*413*293mm)
- Material interior y exterior: acero revestido de alta calidad
- Compresor SECOP, Ventilador EBM
- 1 puerta externa sólida anti-vacío, 2 puertas interiores

Ultracongelador MD-86L108 (Capacidad neta:108 L)



VIP PLUS

Tecnología de conformado LBA (10% +espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidadde almacenamiento).

Armario de acero revestido de alta calidad

Resistencia a la abrasión y la corrosión, fácil de limpiar.

Puerto USB

Permite a los usuarios descargar datos históricos de temperatura para fines de conformidad/auditoría.

Pantalla LED

Controlado por microprocesador/Pantalla LED

Ingenioso diseño del asa

El ingenioso diseño del asa facilita la apertura y el cierre de la puerta. El asa con cerradura protege sus preciadas muestras. También se puede añadir un candado para mayor seguridad de las muestras.

Funciones de alarma

Alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica, alarma de alta temperatura del condensador, alarma de batería baja

Estructura de sellamiento con multicapas de silicona

Las juntas de silicona multicapa proporcionan un sellado hermético entre las puertas interiores y la puerta exterior, reduciendo la tasa de intercambio de calor y conservando mejor la temperatura interior cuando se produce un corte del suministro eléctrico.

Puertas interiores dobles

Puede reducir la pérdida de refrigeración al abrir la puerta exterior, fácil de limpiar.

Filtro extraíble sin herramientas

Limpieza fácil y rápida del filtro

2 ruedas + 2 bloqueos de pie, fácil de mover, bloquear y nivelar.



Ultracongelador de Lab Guard



Ultracongelador MD-86L358

Certificado: CE



Ultracongelador MD-86L458

Certificado: CE, UL



Ultracongelador MD-86L458S

Certificado: CE, UL

Ultracongelador de Lab Guard



Modelo	Rango de Temperatura	Capacidad (L/Cu.Ft)	Dimensiones del producto (mm)(w*d*h)	Conexión eléctrica	Cryotubes(2ml)	Uniformidad de temperatura
MD-86L358	-40°C ~ -86°C	358/12.64	795*885*1855	220-240~V/50Hz 220-240~V/60Hz 115V~/60Hz	24000	≤5°C
MD-86L458	-40°C ~ -86°C	458/16.17	885*855*1980	220-240~V/50Hz 220-240~V/60Hz 115V~/60Hz	32000	≤5°C
MD-86L458S	-40°C ~ -86°C	458/16.17	885*855*1980	220-240~V/50Hz 220-240~V/60Hz 115V~/60Hz	32000	≤5°C

Ultracongelador de Lab Guard



Diseño de puerta estrecha

El congelador puede pasar por una puerta de 750 mm de ancho con la puerta abierta.

Pantalla táctil TFT de 10.1 pulgadas

Pantalla táctil TFT de 10.1 pulgadas, manejo cómodo y eficaz

Funciones de alarma

Alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica, alarma de alta temperatura del condensador, alarma de batería baja

Ingenioso diseño del asa

El ingenioso diseño del asa facilita la apertura y el cierre de la puerta. El asa con cerradura protege sus preciadas muestras. También se puede añadir un candado para mayor seguridad de las muestras.

Revestimiento de acero inoxidable 304

Revestimiento de acero inoxidable 304, resistente al desgaste y a la corrosión, fácil de limpiar.

Las cuatro puertas interiores

Las cuatro puertas interiores están diseñadas para un almacenamiento independiente, lo que reduce las pérdidas de refrigeración al abrir las puertas exteriores.

VIP PLUS

Tecnología de conformado LBA (10% +espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidadde almacenamiento).

Puerto de ecualización de la presión

Puerto de ecualización de la presión, para equilibrar la presión entre el interior y el exterior y ayudar al usuario a abrir la puerta junto con la función de calefacción eléctrica.

Estructura de sellamiento con multicapas de silicona

Las juntas de silicona multicapa proporcionan un sellado hermético entre las puertas interiores y la puerta exterior, reduciendo la tasa de intercambio de calor y conservando mejor la temperatura interior cuando se produce un corte del suministro eléctrico.



Ultracongelador de Dual Guard



Ultracongelador MD-86L568

Certificado: CE, Energy Star



Ultracongelador MD-86L718

Certificado: CE, Energy Star



Ultracongelador MD-86L838

Certificado: CE, Energy Star

Ultracongelador de Dual Guard



Modelo	Rango de Temperatura	Capacidad (L/Cu.Ft)	Dimensiones del producto (mm)(w*d*h)	Conexión eléctrica	Cryotubes (2ml)	Uniformidad de temperatura
MD-86L568	-40°C ~ -86°C	568/20.06	885*995*1980	220-240~V/50Hz 220-240~V/60Hz 115V~/60Hz	40000	≤5°C
MD-86L718	-40°C ~ -86°C	718/25.36	1030*995*1980	220-240~V/50Hz 220-240~V/60Hz 115V~/60Hz	50000	≤5°C
MD-86L838	-40°C ~ -86°C	838/29.59	1175*995*1980	220-240~V/50Hz/60Hz	60000	≤5°C

Ultracongelador de Lab Guard



Diseño de puerta estrecha

El congelador puede pasar por una puerta de 750 mm de ancho con la puerta abierta.

Pantalla LED

Controlado por microprocesador/Pantalla LED

Funciones de alarma

Alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica, alarma de alta temperatura del condensador, alarma de batería baja

Sistema de refrigeración de doble compresor

Sistema de refrigeración de doble compresor, cuando un compresor no funciona, el otro compresor todavía puede mantener la temperatura del refrigerador estable a -81°C .

Revestimiento de acero inoxidable 304

Revestimiento de acero inoxidable 304, resistente al desgaste y a la corrosión, fácil de limpiar.

Las cuatro puertas interiores

Las cuatro puertas interiores están diseñadas para un almacenamiento independiente, lo que reduce las pérdidas de refrigeración al abrir las puertas exteriores.

VIP PLUS

Tecnología de conformado LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento).

Puerto de ecualización de la presión

Puerto de ecualización de la presión, para equilibrar la presión entre el interior y el exterior y ayudar al usuario a abrir la puerta junto con la función de calefacción eléctrica.

Estructura de sellamiento con multicapas de silicona

Las juntas de silicona multicapa proporcionan un sellado hermético entre las puertas interiores y la puerta exterior, reduciendo la tasa de intercambio de calor y conservando mejor la temperatura interior cuando se produce un corte del suministro eléctrico.



Ultracongelador de Inteligente Inverter



Ultracongelador MD-86L568BS

Certificado: CE



Ultracongelador MD-86L708BS

Certificado: CE



Ultracongelador MD-86L818BS

Certificado: CE

Ultracongelador de Inteligente Inverter



Modelo	Rango de Temperatura	Capacidad (L/Cu.Ft)	Dimensiones del producto (mm)(w*d*h)	Conexión eléctrica	Cryotubes (2ml)	Uniformidad de temperatura
MD-86L568BS	-40°C ~ -86°C	568/20.06	885*995*1980	220-240~V/50Hz/60Hz 115V~/60Hz	40000	≤5°C
MD-86L708BS	-40°C ~ -86°C	718/25.36	1030*995*1980	220-240~V/50Hz/60Hz 115V~/60Hz	50000	≤5°C
MD-86L818BS	-40°C ~ -86°C	838/29.59	1175*995*1980	220-240~V/50Hz/60Hz	60000	≤5°C

Ultracongelador de Inteligente Inverter



Diseño de puerta estrecha

El congelador puede pasar por una puerta de 750 mm de ancho con la puerta abierta.

Pantalla táctil TFT de 10.1 pulgadas

Pantalla táctil TFT de 10.1 pulgadas, manejo cómodo y eficaz

Funciones de alarma

Alta y baja temperatura, error del sensor, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de puerta abierta, alarma por falla eléctrica, alarma de alta temperatura del condensador, alarma de batería baja

Doble sistema de refrigeración, doble compresor inverter

Sistema de refrigeración de doble compresor, cuando un compresor no funciona, el otro compresor todavía puede mantener la temperatura del refrigerador estable a -81°C .

Revestimiento de acero inoxidable 304

Revestimiento de acero inoxidable 304, resistente al desgaste y a la corrosión, fácil de limpiar.

Las cuatro puertas interiores

Las cuatro puertas interiores están diseñadas para un almacenamiento independiente, lo que reduce las pérdidas de refrigeración al abrir las puertas exteriores.

VIP PLUS


Tecnología de conformado LBA (10% + espacio útil) y panel VIP para mejor aislamiento térmico (30% + capacidad de almacenamiento).

Puerto de ecualización de la presión

Puerto de ecualización de la presión, para equilibrar la presión entre el interior y el exterior y ayudar al usuario a abrir la puerta junto con la función de calefacción eléctrica.

Estructura de sellamiento con multicapas de silicona

Las juntas de silicona multicapa proporcionan un sellado hermético entre las puertas interiores y la puerta exterior, reduciendo la tasa de intercambio de calor y conservando mejor la temperatura interior cuando se produce un corte del suministro eléctrico.

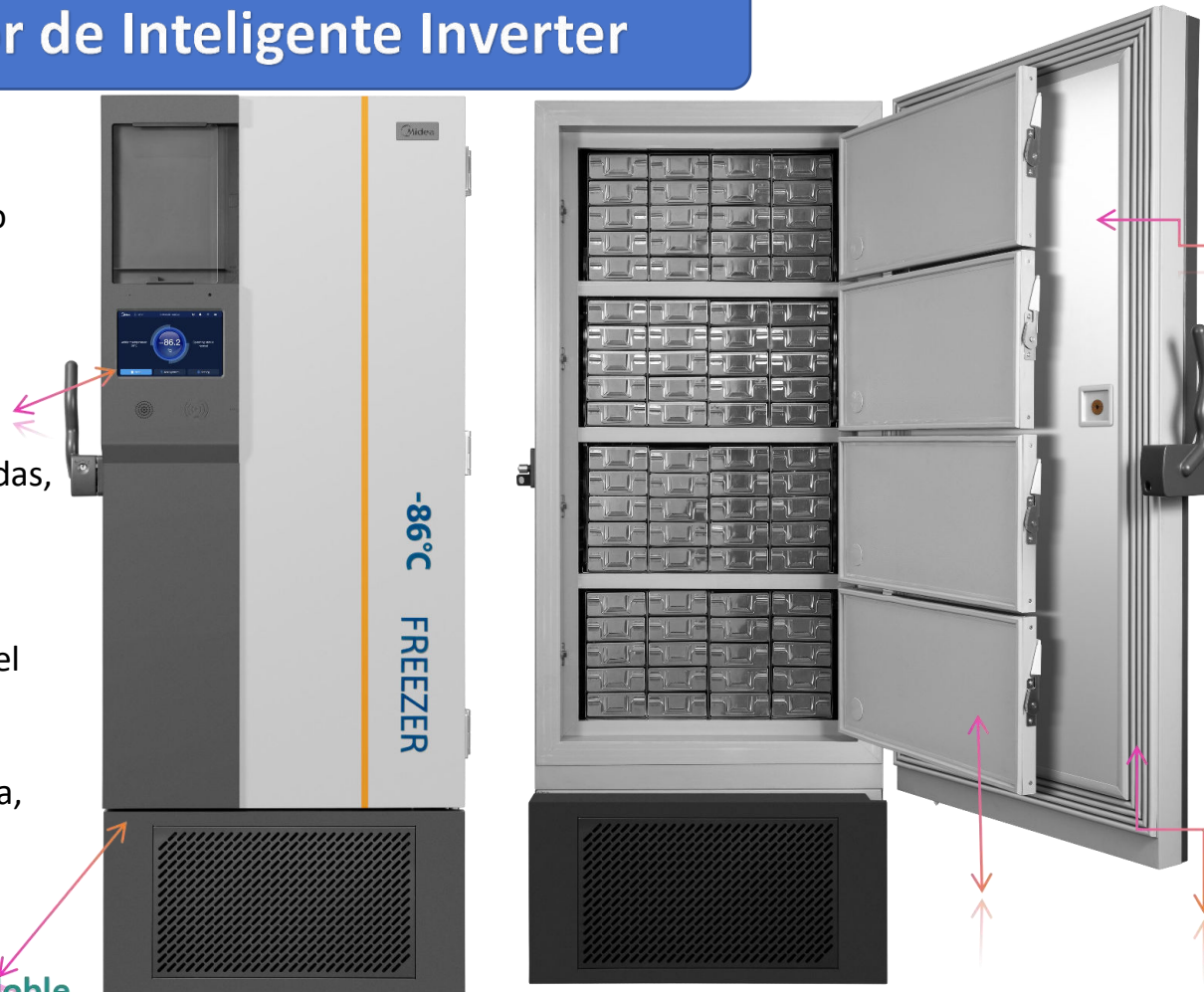

Acceda a más información

www.mideabiomedical.cn

Información de contacto:

Midea Biomedical

Tracy Chen

Director de Ventas para América Latina

Email: tracy.chen@midea.com

Mobile/Whatsapp: +86 18158951495

